

一般医療機器 歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・製造ユニット
医療機器届出番号 22B3X10020000110
[販売名] 歯科用CAD/CAMマシン DWX-43W

DWX-43W



4軸制御による湿式加工で、精度の高い仕上がりを実現

最小限のメンテナンスと簡単な操作で使いやすさを向上させた湿式加工機です。生産性を向上するマルチピンクランプが付属。最大6個のピン付き材料を取り付けることができるため、連続加工が可能となり、作業の流れをより効率的に進めることができます。ATC（オートツールチェンジャー）は最大で6本のミリングバーをセット可能です。



マルチピンクランプ

運用負担を低減し、作業効率を向上

定期フラッシング機能により機体内部の洗浄を行うと同時に、スピンドルの慣らし運転も自動的に実施されるため、メンテナンス作業の負担が軽減されます。クーラントシステムの機構をすべて筐体内部に装備することで、コンパクトなデザインを実現。限られたスペースでも導入しやすく、さらに外部に集塵機を設置する必要がないため、設置環境の自由度が高いのが特長です。



専用ソフトウェア「VPanel for DWX」には、安定稼働を支援する各種機能を搭載。ミリングバーの寿命管理やメンテナンス時期の確認も容易に行えるため、日常の運用をスムーズにサポートします。



加工可能材料



カタナ® アベンシア® P ブロック



カタナ® アベンシア® ブロック 2



カタナ® アベンシア® N

「カタナ®」ブランドマテリアルを高精度に加工


「hyperDENT®」は、「カタナ®」ブランドマテリアル専用の切削モジュールを搭載し、「歯科用CAD/CAMマシン DWX」シリーズとの連携で高精度加工を実現します。本製品加工可能材料である「カタナ® アベンシア」シリーズの性能を最大限に引き出すために、専用CAMソフト『hyperDENT express block』の使用が必要です。

【製造元】株式会社フォロミーテクノロジー・ジャパン
〒108-0022 東京都港区海岸3-24-18 ラシクラス EX 東京ベイ 601号室

hyperDENT
COMPACT

安定した加工がもたらす 精巧な仕上がり

新設計のスピンドルと高剛性フレーム、さらにDGSHAPE社ミリングバーとの相乗効果により、湿式加工工程における安定性が確保されます。これにより高精度かつ高い再現性を備えた補綴装置の制作が可能となり、臨床現場における品質と信頼性の向上に寄与します。

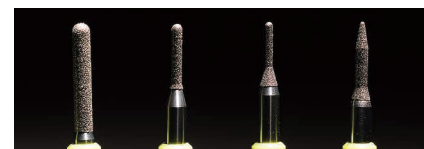

ZGB2-125D ZGB2-75D ZGB2-50D ZGB2-25D

DGSHAPE社製バー
（「カタナ® アベンシア」シリーズ加工対応）

DWX-43W

■参考価格
2,400,000円(税抜) 202270261
■販売名
歯科用CAD/CAMマシン DWX-43W
医療機器届出番号：22B3X10020000110
■製造販売元
DGSHAPE株式会社
〒431-2103 静岡県浜松市浜名区新都田1-1-2



○別売品



添加剤
・クーラント用添加剤 1,000 ml
メーカー希望小売価格
6,500円(税抜) 202270267



キレート剤
・クーラント用キレート剤 250 ml
メーカー希望小売価格
10,000円(税抜) 202270268

加工可能な材料※	歯科切削加工用セラミックス、歯科非鋳造用チタン合金、 歯科切削加工用レジン材料
外形寸法(幅×奥行×高さ)	482 mm × 560 mm × 600 mm
重量	61 kg
電源条件	AC100V ±10%、50/60 Hz (過電圧カテゴリ：区分II、IEC60664-1)、2.1 A
消費電力	約190 W
付属品	電源コード、USBケーブル、自動補正用治具、検出ピン、レギュレーター、六角ドライバー、 マルチピンクランプ、安全上のご注意、クイックアクセスガイドなど 専用ミリングバー [ZGB2-125D×3、ZGB2-75D×1、ZGB2-50D×3、 ZGB2-25D×1、ZGB-125D×3、ZGB-50D×3、ZGB2-125DS×1]

※2025年9月、現在記載している材料でも、仕様や物性によっては加工できない場合があります。
詳細は本機をお買い上げの販売店、またはDGSHAPEコールセンターまでお問合せください。
●本機では、圧縮空気が必要です。コンプレッサーは別途、ご用意いただく必要があります。
●導入に際しては保守契約が必要です。

●参考価格の後の9ケタの数字は株式会社モリタの商品コードです。 ●価格は参考価格です。掲載商品の参考価格は2025年9月現在のものです。 ●印刷のため実際の色調と異なる場合があります。
●ご使用に際しましては、製品の電子添文等を必ずお読みください。 ●仕様及び外観は、製品改良のため予告なく変更することがありますので予めご了承ください。
●歯科用CAD/CAMマシン DWX-43W 一般医療機器 歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・製造ユニット 医療機器届出番号：22B3X10020000110
●カタナ® アベンシア® P ブロック 2 管理医療機器 歯科切削加工用レジン材料 医療機器認証番号：302AFBZX00019Z00
●カタナ® アベンシア® P ブロック 管理医療機器 歯科切削加工用レジン材料 医療機器認証番号：229AFBZX000091Z00
●カタナ® アベンシア® N 管理医療機器 歯科切削加工用レジン材料 医療機器認証番号：301AFBZX00015Z00

クラレノリタケデンタル株式会社

お問い合わせ

☎ 0120-330-922 平日 10:00~17:00
〒100-0004 東京都千代田区大手町2丁目6-4 常盤橋タワー

【販売元】株式会社モリタ
〒564-8650 大阪府吹田市垂水町3-33-18
お客様相談センター：0800-222-8020 (医療従事者様向窓口)

クラレノリタケデンタル
LINE公式アカウント

友だち追加はこちらから



最新情報
配信中!

【カタナ®および「アベンシア」はノリタケ株式会社の登録商標です。
「hyperDENT」は株式会社フォロミーテクノロジー・ジャパンの登録商標です。
T870-01 09/2025