

ワイナビューPMフレーム・PMルーペセット

双眼ルーペ

人間工学に基づいたデザインにより、頸椎・首・背中への負担と同時に目の疲れを軽減します



Thinking ahead. Focused on life.

※LEDライトは別売です

Features


自然な姿勢で体の負担を軽減

PMルーベは光路を45度下方向に曲げているため、視線を落とさず、より自然な姿勢で処置が可能です。
人間工学に基づいたデザインにより、頸椎 首・背中への負担と同時に目の疲れを軽減します。

従来品



PMルーベ

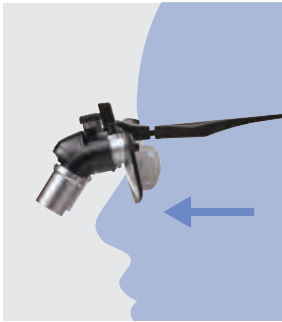

明るく鮮明な画像を実現

マルチコーティングレンズ

低分散ガラスレンズへのマルチコーティングにより色収差*を防止し、
400nm～1000nmの広い波長帯域により、高い光透過率を実現しました。
※色収差とは、レンズを通過する光は色ごとに異なる角度で屈折するため、像のズレとして現れる現象です。

高屈折率プリズム

反射率や透過率等に優れた誘導体コーティングが施されたプリズムにより、
明るい画像を実現しました。

ルーベ倍率と視野のイメージ



3.0X



4.0X



5.0X



5.8X



7.2X

PMルーベ仕様

倍率	作業距離(mm) (調整可能範囲)	視野直径(mm)	焦点深度(mm)
3.0X	380~550	70~90	100
4.0X	380~550	65~80	60
5.0X	380~550	55~70	60
5.8X	380~550	55~70	40
7.2X	380~550	45~60	40

ルーベ・フレーム共		ルーベのみ
フリップアップ	TTL	
60	52	22
61	53	23
61	53	23
63	55	25
63	55	25

重さ(g)

チタンフレームを採用した軽量でフィット感に優れたPMフレーム

フリップアップ(ルーペ跳ね上げ式)



フレーム重さ 38g



メモリ付きの
ルーペバーで
PD調整が可能
PD=瞳孔間距離



煽り角の
微調整が可能

TTL(ルーペ固定式)



フレーム重さ 30g
術者のPDに合わせて、ルーペホルダーが
レンズに固定されます。



フレームカラー(5色)



ブラック(B)



ゴールド(GD)



シルバー(S)



ブラック/レッド(B/R)



ブラック/ブルー(B/BL)

ルーペ

誘導体コーティングが施された
高屈折プリズム

低分散ガラスレンズ
へのマルチコーティング
により色収差を防止

コードレスLEDライト
マエストロ用アダプター

軽量チタンフレーム

ノーズパッド

ノーズパットの穴の位置と
専用ヒンジの組み合わせ
で、三段階高さ調整が可能



受け部

①
②
③
ソフトスタンダード
(三段階高さ調整可)

シールド

フリップアップ用シールドは
穴あきと穴無しから選択可能

※穴あきシールドはルーペをより眼に近づけ視野を確保する穴です。
※シールドの穴はPDに合わせて調整します。

価格

PMフレーム フリップアップ・PMルーペセット		
倍率	標準価格	品目コード
3.0倍	380,000円	206720670
4.0倍	392,000円	206720671
5.0倍	410,000円	206720672
5.8倍	425,000円	206720673
7.2倍	446,000円	206720674

PMフレーム TTL・PMルーペセット		
倍率	標準価格	品目コード
3.0倍	380,000円	206720675
4.0倍	392,000円	206720676
5.0倍	410,000円	206720677
5.8倍	425,000円	206720678
7.2倍	446,000円	206720679

構成品

PMフレーム フリップアップ・PMルーペセット

セット内容：ルーペ1種含む

MODEL	商品名
YNV-B	PMルーペ用フリップアップフレーム ルーペホルダー付き 
YNV-B-SH	フリップアップ用 シールド 穴あき (ルーペを眼により近づけ、視野を確保する為の穴) 
..... (どちらか選択)	
YNV-B-S	フリップアップ用 シールド 

PMフレーム TTL・PMルーペセット

セット内容：ルーペ1種含む

MODEL	商品名
YNV-T	PMルーペ用TTLフレーム単体 
PM-TTL	PMTTLルーペホルダー付レンズ (PD指定) 

共通品

MODEL	商品名
YVU-NS	ソフト スタンダードパッド 
AP-7099	サポートコード (コード止め付き) 
YNA-T-C	ルーペ単体用ケース 外寸：170 x 130 x 69 (mm) 

MODEL	商品名
AP-9136	レンズクロス 
KM-0.79	六角ドライバー 0.71mm 
YNA-HD	ドライバー (+・-・六角0.89・六角1.27) 
PM-8022	レンズキャップ 

別売品

矯正レンズ 24,000円(実費)

MODEL	商品名
PM-B-LH	フリップアップ用矯正レンズ 穴あき (1組)(処方箋に基づく)(実費) 
PM-B-L	フリップアップ用矯正レンズ (1組)(処方箋に基づく)(実費) 

MODEL	商品名
PM-T-L	TTL用矯正レンズ (1組)(処方箋に基づく)(実費) 

別売品

コードレスLEDライト マエストロ

- 簡単に装着可能な軽量・高輝度のコードレスLEDライト
- 照明光は演色性が高く、自然光に近い見え方を実現(CRI90+)
- ワイナビュー PMフレーム、メディビューフレーム、ワイナビュー エアフレームに簡単に装着可能



背面



装着イメージ



照明スポットの高い照度均一性で
むらのない照明。



タッチセンサーによりライトのON/OFF、
光量変更が可能。



無色のUVキュアリングフィルター
(コンボジットフィルター)が付属。



充電用クレードル(付属)
同時にバッテリー2個充電可能。

主な仕様

スポットサイズ	Φ82mm
照度(lux 3段切替) (距離35cm時)	4,800(ステップ1)、10,000(ステップ2)、15,500(ステップ3)
LEDの演色性	CRI 90以上
電源	充電式バッテリーパック(リチウムイオンポリマーバッテリー)
連続使用時間	約3.5時間(4,800 lux)、約2時間(10,000 lux)、約1.5時間(15,500 lux)
充電時間	1時間40分
バッテリー寿命	約500回
バッテリー大きさ / 重量	50x28x15mm / 17g
LEDライト重量	14g

商品構成

LEDライト(本体)、充電式バッテリーパック 3個、
充電用クレードル
(USB電源アダプター・USBケーブル付)、
UVキュアリングフィルター(コンボジットフィルター)、
+ドライバ、レンズクロス、専用ケース
標準価格 170,000円 206720037



販売名:ワイナビューフレーム 一般名称:双眼ルーペ 医療機器届出番号:13B1X00268000183
医療機器の分類:一般医療機器(クラスⅠ)
販売名:コードレスLEDライト マエストロ 一般名称:額帯灯 医療機器届出番号:13B1X00268000187
医療機器の分類:一般医療機器(クラスⅠ)



発売

株式会社 モリタ

大阪本社 大阪府吹田市垂水町3-33-18 〒564-8650 T 06. 6380 2525
東京本社 東京都台東区上野2-11-15 〒110-8513 T 03. 3834 6161
お問合せ お客様相談センター T 0800. 222 8020 (フリーコール)〈歯科医療従事者様専用〉

製造販売 株式会社キラー・アンド・ワイナー 東京都文京区本郷3-35-3 本郷UCビル

Morita Global Site: www.morita.com
More Infos about Products: www.dental-plaza.com

掲載商品の標準価格は、2025年10月21日現在のものです。
標準価格には消費税等は含まれておりません。
ご使用に際しましては、製品の添付文書および取扱説明書を必ずお読みください。
仕様及び外観は製品改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。
製品の色は印刷のため、実際とは異なる場合がございます。

PUB : NO,M8423,1,2509,60,000IN,GQ/JPC 208520196

注文書

(PMフレーム・PMルーペ/フリップアップ・TTL)

日付 年 月 日

2025年10月現在

必要事項をチェック、記入の上、お出入りの歯科ディーラー様にお渡しください。

PMルーペ

倍率	☐ 3.0X	☐ 4.0X	☐ 5.0X	☐ 5.8X	☐ 7.2X
作業距離(mm)	☐ 指定 ()	☐ 380	☐ 450	☐ 500	☐ 550

※偏向型ルーペは直視型ルーペより作業距離は50mm長く考えて下さい。

フレーム

☐ フリップアップ	☐ TTL
	
シールド穴あきを選択される場合は、 瞳孔距離を指定してください。(右: mm 左: mm)	瞳孔距離を指定してください。(右: mm 左: mm)

フレームカラーの選択

☐ ブラック(B)	☐ ブラック/レッド(B/R)
☐ ゴールド(GD)	☐ ブラック/ブルー(B/BL)
☐ シルバー(S)	

シールドの選択

※瞳孔距離に合わせて、穴の位置は変わります。

MODEL	商品名(フリップアップ)
☐ YNV-B-SH	フリップアップ用 シールド 穴あき(1組) (ルーペを眼により近づけ、視野を確保する為の穴) (どちらか選択)
☐ YNV-B-S	フリップアップ用 シールド(1組)

矯正レンズ

※矯正レンズは処方箋が必要です。

MODEL	商品名(フリップアップ)
☐ PM-B-LH	フリップアップ用 矯正レンズ 穴あき(1組)*
☐ PM-B-L	フリップアップ用 矯正レンズ(1組)*
MODEL	商品名(TTL)
☐ PM-T-L	TTL用 矯正レンズ(1組)*

LEDライト

MODEL	商品名(TTL)
☐ KM-I	マエストロ LEDライト セット
備考	

ディーラー様記入欄	ディーラー様/営業所	/	納入先	施設名
	担当者/携帯	/		ユーザー様名
	TEL/FAX	/		TEL

モリタ記入欄	株式会社モリタ 拠点名	担当者
--------	-------------	-----